

AL800 ●アルカリイオン整水器

シンプルなデザイン、そして5種類の水が選択可能。



AL800

本体セット (浄水カートリッジUHC3000)
191,400円 (税抜価格174,000円)
※電気工事、取付工事費別

【医療機器認証製品】

販売名：ビルトインアルカリ整水器 D01
医療機器認証番号：224AKBZX00031000

※医療機器認証番号が明記されている「アルカリイオン整水器」及び「電解還元水生成器」は家庭用医療機器（連続式電解水生成器）として、同一の基準で認証されており、生成されるアルカリイオン水の認められている効能又は効果は同一です。

除去物質数
17+2
BUILT-IN TYPE

専用
水栓

交換
サイン


回転
規制

上面
施工




*1,2-DCE：シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン

簡単操作で、5種類の水が選べます。

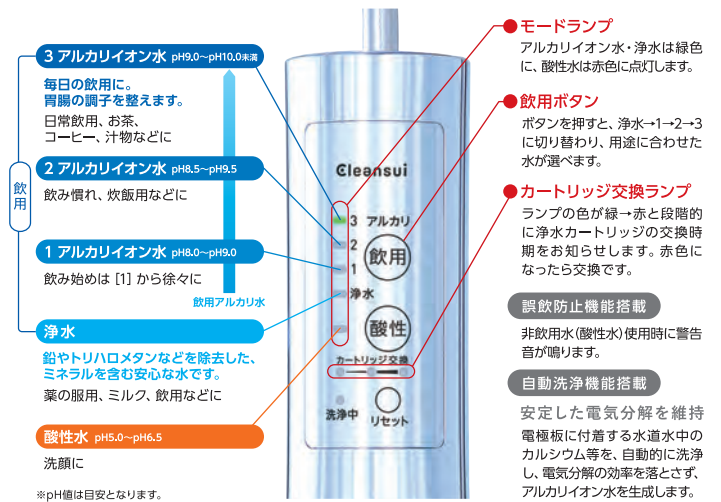

アルカリ整水器のしくみ

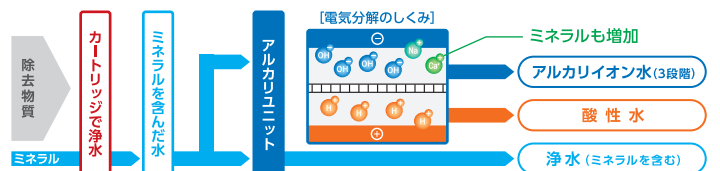


直販限定品

■ 交換用浄水カートリッジ：UHC3000 19,800円 (税抜価格18,000円)

- 浄水能力17+2物質除去のハイグレードタイプ。
- 浄水を1日25L使用した場合、約1年での交換となります。



AL800寸法図

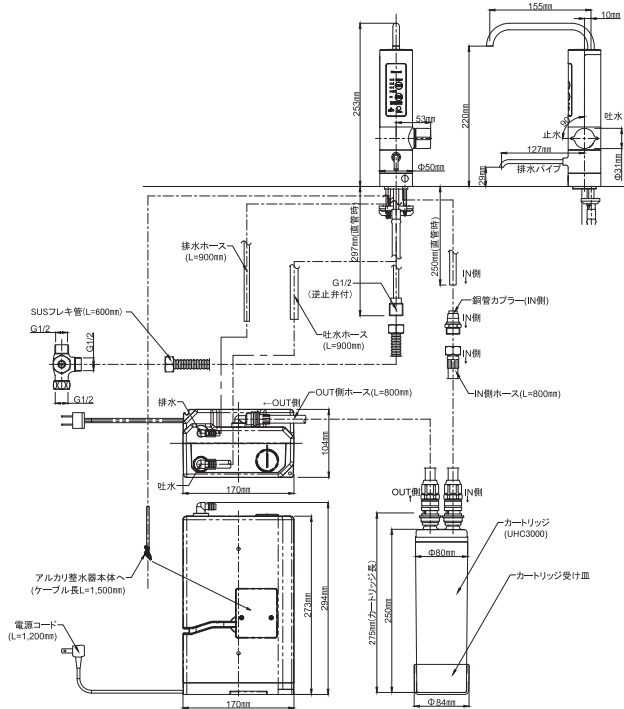

浄水カートリッジ仕様

●セット品番

セット品番	AL800
セット内容	AL800水栓とUHC3000、整水器本体のセット

●仕様

浄水カートリッジ品番	UHC3000
材料の種類	浄水カートリッジ ABS樹脂 水栓 黄銅、ステンレス、EPDM 接続ホース ポリエチレン
ろ材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭、不織布
ろ過流量	3.5L/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa ※本品の常用使用圧力は0.07MPa~0.35MPa

浄水能力	遊離残留塩素	総ろ過水量 40,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	濁り(雑菌・微粒子等)	総ろ過水量 10,000L、ろ過流量50%、JIS S 3201 試験結果
	クロロホルム	総ろ過水量 9,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	プロモジクロロメタン	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	プロモホルム	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	総トリハロメタン	総ろ過水量 9,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	CAT(農薬)	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	2-MIB(カビ臭)	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	溶解性鉛	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	1,2-DCE*	総ろ過水量 9,200L、除去率80%、JIS S 3201 付属書A試験結果
	ベンゼン	総ろ過水量 9,200L、除去率80%、JIS S 3201 付属書A試験結果
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量 9,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
フェノール類	総ろ過水量 9,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果	
ジェオスミン	総ろ過水量 9,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果	
鉄(微粒子状)	除去率80%、JWPAS B 試験結果	
アルミニウム(中性)	除去率80%、JWPAS B 試験結果	

ろ材の取替時期の目安	約12か月(1日25L使用した場合) ※クロロホルムを基準としております。
浄水カートリッジ質量(満水時)	0.6kg(1.3kg)
浄水カートリッジサイズ	最大径80mm×高さ275mm
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(鉛は除く)

※1,2-DCE: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

給水装置の構造及び材質の基準による表示	認証登録品の種類	アルカリイオン整水器	浄水器(浄水器Ⅱ型)
	水道法基準適合性能項目	耐圧性能、浸出性能、水撃限界性能、逆流防止性能	浸出性能
	認証登録番号	TC5004	W032-20024-200

定格・仕様

●アルカリイオン整水器本体仕様

定格	AC100V 50-60Hz 2.9A
消費電力	最大約250W(待機時:約0.5W)
使用可能な配水管圧力	0.07~0.75MPa
使用可能な最小動水圧	0.07~0.35MPa(使用可能な最小動水圧 0.07MPa)
使用水温	35℃未満
材料	ABS樹脂、ポリアセタール、白金、チタン
寸法	幅 170mm × 奥行 104mm × 高さ 294mm
質量	3.5kg(満水時約4.0kg)
電源コード	1,200mm
方式	連続電解方式
電解能力切替	アルカリ:3段階/酸性:1段階
連続使用可能時間	アルカリ1・2・3:約30分/酸性水:約10分
定格水量	2.5L/分(水圧0.1MPa、20℃のとき)
吐水量(生成水量)UHC3000	吐水口水量:約2.25L/分 排水口水量:約0.25L/分(水圧0.1MPa、20℃のとき) 吐水口水量:約3.6L/分 排水口水量:約0.4L/分(水圧0.3MPa、20℃のとき)
電極洗浄	自動洗浄方式

●水栓寸法

取付穴径	直径36~40mm	吐水口長さ	155mm
台座径	直径50mm	吐水口高さ	220mm
取付天板厚範囲	4~30mm		

※仕様は予告なく変更することがあります。

梱包部品

- アルカリ整水器本体 1台 ●アルカリ整水器専用水栓 1本 ●フレキ管 1本(パッキン2個付) ●スプリング 1本
- 浄水カートリッジ 1個(UHC3000) ●カートリッジ受皿 1個(両面テープ付)
- 上面施工工具(AL用) 1個 ●止水機構分岐栓 1個(パッキン1個付) ●クイックファスナー(AL用) 1個
- 銅管カバー 1個 ●水栓付属品:六角レンチ(4mm)、キャップ(2個)、取付ネジ(1本)
- ホースバンド(大:1個 小:1個) ●L字固定金具 1個 ●両面テープ 1枚 ●アルカリ整水器本体取付ビス 4本
- IN側・OUT側ホース(AL用) 各1本(パッキン1個、OUTホースOリング2個付) ●pH測定液セット
- 説明書入り袋 1袋(取説明書、据付説明書、保証書/お知らせコールカード、保護シール、結束バンド、防虫シート)

■アルカリイオン水・酸性水の使用について

- アルカリイオン整水器により生成したアルカリイオン水を飲用する際には、次のことにご注意ください。(1)医薬品をアルカリイオン水で服用しないください。(2)飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状がみられない場合には、医師にご相談ください。
- 酸性水を使用するときは次のことにご注意ください。肌の弱い方、アレルギー体質の方は、医師にご相談ください。
- 次のような方はご使用前に医師にご相談ください。(1)医師の治療を受けている方(2)持病のある方または身体が弱っている方(3)腎臓に障害のある方
- 初めてご使用になる場合は「アルカリ1」より少量ずつ(コップ1~2杯)2週間程度アルカリイオン水に慣れていただき、順次pHを上げてご使用されることをおすすめします。
- 下痢や発疹などの症状が出た場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。
- 水質(地下水等)によっては、十分なpH値が得られない場合がありますので、本器をお買い上げになる前に、販売店にご相談ください。

⚠ 使用上の注意

- 水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。●温泉水・井戸水など異物を多く含む水にはご使用になれません。●浄水カートリッジは定期的に交換してください。●浄水カートリッジの取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧などにより異なります。
- 浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください。●くみ置きした浄水は、なるべく早くご使用ください。●毎日の使用開始時は浄水を15秒以上流してからご使用ください。また、2日以上ご使用にならなかったときは、浄水を1分以上流してからご使用ください。●浄水カートリッジを凍結させないようにしてください。●浄水カートリッジは必ず当社指定の製品と組み合わせでご使用ください。●ろ過流量は、組み合わせる製品によって変化する場合があります。●本品の常用使用圧力は0.07~0.35MPaです。●水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(鉛は除く)は除去できません。また硬水を軟水に変えることはできません。●養魚用などには使用しないでください。●定期的に水漏れがないか必ず確認してください。
- ご使用の際は、必ず適用機種取扱説明書をお読みください。●本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は責任を負いかねます。This product is designed for use in Japan only.The warranty is void outside Japan.